


## 全国どこへでもdirectに、そしてsafetyにお届けします

トラブルには責任を持って対処します

製品出荷にあたっては細心の注意を払っております。  
万が一、運送中のアクシデントによりお手元に届いた  
製品に破損などのトラブルがあった場合は、責任を持って  
対処します。

本社倉庫と北海道倉庫から  
翌日納品可能

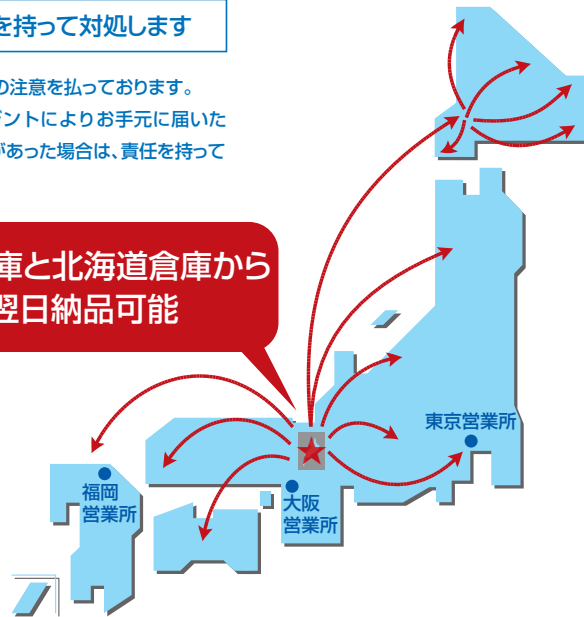

アテクトでは弊社カタログ記載品以外の商品も取り扱っております。  
小ロット販売やお客様のニーズに合わせた数量での販売も可能です。  
是非、お問い合わせください。

また、HPでもお困りごとなどお問い合わせいただけますので  
ご活用ください。

アテクト 衛生検査

検索

高品質・低コストの製品をお客様のお手元に直接お届け致します。

ご注文専用

フリーダイヤルFAX



0120-82-4929

カスタマーセンター

フリーダイヤルTEL



0120-812-880

atect 株式会社 アテクト

滋賀本社 〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1  
TEL 0748-20-3535 FAX 0748-25-7171

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3 プリリアンビル2階A号室  
TEL 03-6910-3114

大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島2-8-6 新大阪駅前ビル 1002号  
TEL 06-4862-5025

福岡営業所 〒802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町11-23  
TEL 093-512-3130

URL <https://www.atect.co.jp> E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)

customer  
direct

vol.22

お客様の声を反映させた機能重視のオリジナルブランド

Full-Steri

## 衛生管理用品カタログ

一貫した直接販売体制だからこそできる、リーズナブルな機能性重視の商品を生産。  
ニーズをしっかりと形にし、お客様の元へ確実にお届けします。

### 目次

#### P1~P3 TOPICS

各種検査代行サービス・デリバリー検査・  
微生物同定サービス・衛生管理指導・教育サービス  
通話無料カスタマーセンター開設  
ホームページ上で買い物が可能となりました

#### P4

アテクトの新品

#### P5~P6

検査必需品

#### P7~P9

調製済の生培地・液体培地

#### P10

ふき取り検査用器具

#### P11

検体前処理用希釈液・緩衝液

#### P12~P14

検体の採取・保存、検査後の廃棄用必需品

#### P15

その他検査必需品

#### P16

サルモネラ、黄色ブドウ球菌検査用  
緩衝ペプトン水

- ※ **動画** マークはHPより、商品の使い方をご覧頂けます
- ※ **New** マークは新商品です
- ※ **PTO** マークはPack To Order  
お客様のご要望に応じて包装単位を変更できます
- ※ **詰合せ** 10枚単位でお客様のご要望に応じて  
各種生培地を詰め合わせが可能です

atect  
株式会社 アテクト



# Topic! ① 各種検査代行サービス

～検査室が無い、コストがかけられない、検査方法が分からないお客様 アテクトに検査をお任せ下さい～

微生物検査の精度を客観的に確かめる為の「クロスチェック」にご活用頂けます!

年間14,000事業所以上のお取引実績がある弊社が、登録衛生検査所と提携し検査代行を行います。

## 登録衛生検査所の証明書発行

登録衛生検査所がお客様の検体(食材・食品等)を責任をもって検査いたします。

## 充実のサポート体制

宅配便で検体を受付けるため、全国のお客様にご利用いただけます。


また、ご不明点は電話やメールにてお答えいたします。

迅速性 気になる検査結果をスピーディーにご報告いたします。

## 〈検査代行サービスラインナップ〉

検査種類	検査項目	価格表			
■食品微生物検査	一般生菌・大腸菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ・緑膿菌・真菌(カビ・酵母)など	1菌種	¥ 2,000-	4菌種	¥ 8,000-
		2菌種	¥ 4,000-	真菌	¥ 3,000-
		3菌種	¥ 6,000-	酵母	¥ 6,000-
■栄養成分分析	義務表示5項目 (エネルギー・タンパク質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量)) 義務表示5項目+糖質・食物繊維	義務行事5項目		¥ 14,000-	
		義務表示5項目+糖質・食物繊維		¥ 42,000-	
■アレルギー検査	義務表示7項目(卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに) 義務表示7項目+ヒスタミン・その他のアレルギー物質	義務表示1項目(イムノクロマト法)		¥ 6,000-	
		ヒスタミン		¥ 8,000-	
■異物検査	有機物・無機物・虫の鑑別	有機物・無機物・虫の鑑別		¥ 20,000-	
		有機物・無機物・虫の鑑別		¥ 10,000-	
				1項目追加ごと	
■腸内細菌検査	3菌種 (赤痢菌・サルモネラ(腸チフス・パラチフス)・O-157)	3菌種(赤痢菌・サルモネラ(腸チフス・パラチフス))O-157		¥ 700-	
				1人あたり	
■水質検査	11項目・26項目・51項目 (一般生菌・大腸菌・カドミウム・水銀等)	水質検査(飲料水) 11項目		¥ 12,000-	
		水質検査(飲料水) 16項目		¥ 36,000-	
		水質検査(飲料水) 51項目		¥160,000-	
■ノロウイルス検査	RT-PCR法(高感度測定) イムノクロマト法(簡易法)	RT-PCR法(高感度測定)		¥ 8,000-	
		イムノクロマト法(簡易法)		¥ 6,000-	

## 検査の流れ

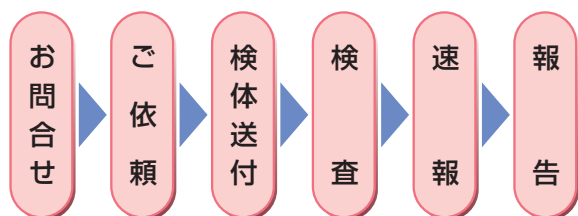

# Topic! NEW ② デリバリー検査(表面付着菌数測定)

～日々の衛生管理をアテクトにお任せ下さい～

お客様に代わって表面付着菌数を測定するサービスです。弊社から検査キットを送付しますので、お客様にて検査したい箇所をスタンプして下さい。その後返送いただき結果を報告いたします。設備・検査器具が不要で簡単に検査ができ、衛生管理の改善や意識向上に役立てていただけます。

## 料金

※下記以外の菌種も承りますのでお尋ね下さい

	一般生菌	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	サルモネラ	価格
2菌種セット	10枚	10枚			¥18,000-
	20枚	20枚			¥23,000-
3菌種セット	10枚	10枚	10枚		¥22,000-
	20枚	20枚	20枚		¥26,000-
4菌種セット	10枚	10枚	10枚	10枚	¥28,000-
	20枚	20枚	20枚	20枚	¥32,000-



# Topic! ③ DNA解析による微生物同定サービス

～日本薬局方記載のプライマーで解析～

## 微生物同定

- 培地上に見慣れないコロニーが発育したのでどのような菌か知りたい。
- コンタミネーションによるクリーム品の菌を特定して欲しい。
- 最短(超特急便)2日で回答します。(別料金)

## 解析

品番	依頼内容	納期	価格
091-00007	細菌 or 真菌	検体到着後、5営業日	¥16,500-
091-00009	不明		¥22,000-

サンプルの状態によって納期が前後する場合がございます。サンプル送付方法: 寒天培地に検体を純培養し、シャーレの周りをテープなどで密封し冷蔵(クール便)でお送り下さい。



肉種DNA判別試験も対応いたします(牛・豚・鶏・馬・羊)。

肉種DNA判別試験とは、加工食品や原材料で牛、豚、鶏などの表示以外の肉種が入っていないかを調べる為の検査です。

# Topic! ④ 衛生管理指導・教育サービス

～お客様へ微生物検査ノウハウ等の技術サポート～

食の安全性や、品質・衛生管理に対する消費者の意識が高まる昨今、アテクトはお客様への衛生管理指導・教育サービスを行っています。衛生管理の現場に配属されたばかりの担当者や、これから細菌検査を実施する企業様などに必須項目の食品細菌検査の実践をまじえてノウハウをご提供致します。

お悩み【例1】	お悩み【例2】	お悩み【例3】	お悩み【例4】
これから細菌検査を実施する。	検査はしないといいけないが、ノウハウがよくわからない。	細菌検査専門スタッフがない。	細菌検査は実施しているが、もう少し高度な検査をしたい。



このようなお悩みをお持ちのお客様のチカラになります。

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

**Topic!** ⑤ **通話料無料の顧客センター開設**

～より一層のサービス向上を目指して参ります～

2019年7月より、  
通話料無料の顧客センターを  
開設いたしました。

**0120-812-880**

までお気軽に問合せ下さい。



**Topic!** ⑥ **ホームページ上でお買い物が可能となりました**

～お客様専用のIDとパスワードを発行致します～

IDとパスワードでお客様専用ページへ  
ログインしていただき、ネット上からの  
ご注文が可能です。

またホームページ上限定のお得なご案内  
なども随時掲載しております。

ご希望の方は、TEL(フリーダイヤル)、  
FAX、MAILでお気軽にお問合せ下さい。

**TEL : 0120-812-880**

**FAX : 0120-82-4929**

**MAIL :**  
**biosales@atect.co.jp**



New

**滅菌検液袋 遮光タイプ1200ml**



- 特徴**
- 5層フィルムでバリアー性あり湿度対策可能
  - アルミ素材で遮光性機能あり
  - ヒートシール対応袋で密封が可能
  - 自立式袋で操作性に優れている
  - 丸めて廃棄でき、ゴミを削減
  - 10枚/袋など必要な枚数で梱包可能
- 仕様**
- 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエチレン・ポリエチレン・アルミ  
サイズ：18(幅)cm × 26(深)cm

品番	品名	入数
061-21302	滅菌検液袋 遮光タイプ1200ml	50枚/袋

New

**滅菌検食袋 MARK-H(サンプリングバッグ)**



- 特徴**
- 記入できる箇所を追加したことにより、透明箇所に入記して済んでしまうリスクを軽減と検体名が見やすくなり、作業性と効率アップします!
- 仕様**
- 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエチレン  
サイズ：17(幅)cm × 24(深)cm

品番	品名	入数
061-21205	滅菌検食袋 MARK-H (1000枚入)	1,000枚 (100枚包装)



ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります


FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索



ディスポシャーレ

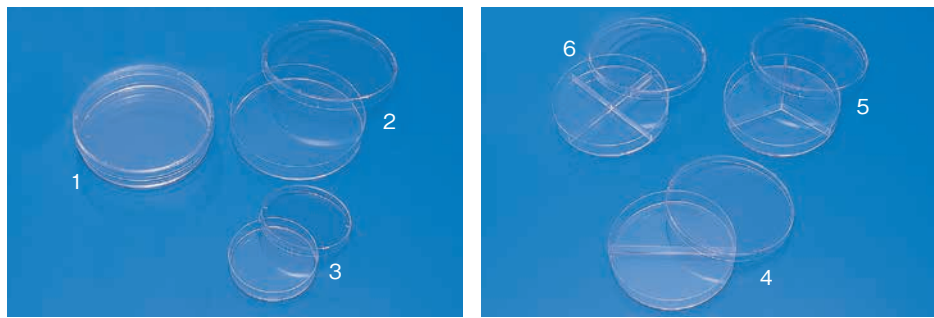

**特徴** 持ちやすく、使い易いシャーレです。リブを設け、重ねた際に安定します。リブにくぼみがあり、本体と蓋がくっつきにくい構造です。また、自動分注機用(オートシャーレ)もございます

**仕様** 滅菌：電子線滅菌 材質：ポリスチレン

品番	品名	サイズ	入数
1 011-70101	滅菌シャーレ φ86×13.5mm 600枚入	直径8.6cm×1.35cm	600枚(10枚包装)
2 011-10223	浅型シャーレ滅菌済 SLE	直径9cm×1.5cm	500枚(10枚包装)
2 011-50300	深型シャーレ滅菌済 SLE	直径9cm×2.0cm	500枚(10枚包装)
3 011-80200	φ60シャーレ滅菌済 SRS1401	直径6cm×1.5cm	500枚(20枚包装)
4 011-20201	2分割シャーレ滅菌済 SRS2101PS01	直径9cm×1.5cm	500枚(10枚包装)
5 011-30201	3分割シャーレ滅菌済 SRS3101PS01	直径9cm×1.5cm	500枚(10枚包装)
6 011-40201	4分割シャーレ滅菌済 SRS4101PS01	直径9cm×1.5cm	500枚(10枚包装)

箱の大きさ 浅型シャーレ：48cm×48cm×37cm 深型シャーレ：48cm×48cm×42cm  
φ60シャーレ：35cm×45cm×48cm φ60シャーレ：31cm×31cm×34cm

ディスポスプーン




**特徴** 1本ずつの個包装です。サンプルの無菌的採取に最適です。持ち手部分が長く、汚染が抑えられます

**仕様** 滅菌：EOG滅菌 材質：ポリスチレン サイズ：16cm×3.5cm

品番	品名	入数
061-32001	滅菌ディスポスプーン	500本

箱の大きさ 28.5cm×45.5cm×36.5cm

PTO 滅菌済みディスポスプーン(多機能タイプ)

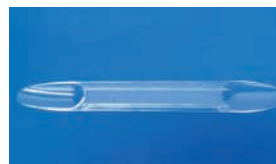

**特徴** 両サイドに匙があり、4mlと2mlが計量可能です。柄の部分に10cmのスケール機能付です。お好みの本数で梱包いたします。(別途お見積り致します) Y線滅菌済みで個包装の為安心してご使用頂けます。

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌 材質：ポリスチレン サイズ：20cm

品番	品名	入数
061-32003	滅菌済みディスポスプーン(多機能タイプ)	200本

アテクトの粉末培地

**特徴** 容器の口が広く作業が容易です  
◆お試用サンプル有(200ml用)



品番	品名	容量
071-00001	アテクトの粉末培地(標準寒天) 500g	500g
071-00002	アテクトの粉末培地(デソキシコレート) 500g	500g
071-00003	アテクトの粉末培地(ポテト寒天) 450g	450g
071-00004	アテクトの粉末培地(マンニト寒天) 500g	500g

標準寒天培地 500g

1000ml あたり 23.5g

● 組成  
ペプトン：5.0g  
酵母エキス：2.5g  
ブドウ糖：1.0g  
寒天：15.0g  
pH 7.0±0.2

デソキシコレート寒天培地 500g

1000ml あたり 45.0g

● 組成  
ペプトン：10.0g  
乳糖：10.0g  
塩化ナトリウム：5.0g  
クエン酸鉄：1.0g  
クエン酸ナトリウム：1.0g  
デソキシコール酸ナトリウム：1.0g  
ニュートラルレッド：0.033g  
リン酸水素カリウム：2.0g  
寒天：15.0g  
pH 7.3±0.2

ポテトデキストロース寒天培地 450g

1000ml あたり 39.0g

● 組成  
ジャガイモデンプン：4.0g  
デキストロース：20.0g  
寒天：15.0g  
pH 5.6±0.2

マンニト食塩寒天培地 500g

1000ml あたり 111.0g

● 組成  
カゼイン-スイ消化ペプトン：5.0g  
動物組織-ペプシン消化ペプトン：5.0g  
肉エキス：1.0g  
塩化ナトリウム：75.0g  
D-マンニトール：10.0g  
フェノールレッド：0.025g  
寒天：15.0g  
pH 7.4±0.2

精製水



**特徴** JIS規格 A3クラスワンウェイ容器入り。逆浸透膜(RO)とイオン交換樹脂で精製しています

**ご使用例** ①培地の作製用精製水として  
②化学分析用の精製水として  
③希釈用の精製水として

**仕様** 材質：軟質ポリエチレン 滅菌：無滅菌  
◆滅菌精製水も対応いたします

品番	品名	容量
051-00001	精製水20L	20L×1箱
051-00005	精製水5L	5L×1箱
051-00009	精製水用コック	1個

※精製水20L 2箱よりご注文可能  
※精製水5L 別途送料 ¥600~(1箱につき)  
箱の大きさ 精製水20L：30cm×30cm×30cm  
精製水 5 L：20cm×20cm×20cm

アテクトのEO液

**特徴** 卵黄液に代わり、オートクレーブ可能なマンニト食塩寒天培地用の添加剤です。黄色ブドウ球菌の卵黄反応が見やすくなります。1本で25枚の生培地を作製できます

**仕様** 容量：50ml/1本 材質：(本体)ガラス (キャップ)ポリプロピレン

**使用上の注意** 必ずオートクレーブ前に添加してください。添加量は培地量の10%です。オートクレーブ後、泡が発生しやすいのでゆっくりと培地を撈拌してください



品番	品名	入数
053-14002	アテクトのEO液50ml	2本

※1~2箱発送時 別途送料 3箱以上発送時 送料弊社負担  
※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

無リンアルカリ性洗剤 インバクトA



**特徴** 油脂、タンパク質、マジックインキの除去に最適。減容ボトルなので小さく折りたたんで廃棄できます。無泡性分注用ノズル付き

**使用方法** 浸漬洗浄の場合 水1Lに10ml加える  
超音波洗浄の場合 水1Lに5ml加える


品番	品名	入数
052-10201	アルカリ性洗剤インバクトA 2kg×4本	2kg×4本
052-11101	アルカリ性洗剤インバクトA 20kg	20kg×1個

箱の大きさ アルカリ性洗剤インバクトA 2kg×4本：21cm×27cm×22cm  
アルカリ性洗剤インバクトA 20kg×1個：21cm×27cm×22cm

ディスポ試験管

**特徴** 自立式のディスポ試験管で、スクリュキャップ式です。廃棄が容易で、ターラム管入りもございます

**仕様** 滅菌：電子線滅菌 材質：ポリプロピレン(本体) ポリエチレン(キャップ) サイズ：直径1.8cm(口径)×10.5cm

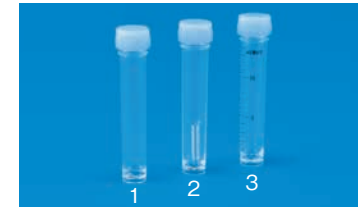

試験管立て付

品番	品名	入数
1 012-18001	ディスポ試験管150本入 滅菌済	150本(10本包装)
2 012-18002	ディスポ試験管150本入 滅菌ターラム管入	150本(10本包装)
3 012-18003	ディスポ試験管150本入 滅菌目盛付き	150本(10本包装)
012-18004	ディスポ試験管200本入 滅菌無	200本(40本包装)

※1~2箱発送時 別途送料 3箱以上発送時 送料弊社負担  
箱の大きさ ディスポ試験管：26cm×36cm×12.5cm

動画 無菌卵黄液



**特徴** 生理食塩水で50%に調製した無菌卵黄液です。調製、滅菌済のため培地にそのまま添加可能です

**仕様** 容量：50ml/1本 滅菌：ガンマ線滅菌 容器材質：(本体)ガラス (キャップ)ポリプロピレン

**使用上の注意** 分注前に泡が出ないようにゆっくりと瓶を振り、よく混和して下さい

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数
053-14001	無菌卵黄液50ml	2本

※1~2箱発送時 別途送料 3箱以上発送時 送料弊社負担  
※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

フルステリの除菌スプレー



**特徴** 75%濃度エタノール製剤です。食品添加物製剤のため、食品に直接噴霧できます

成分組成：エタノール 67.890%  
乳酸ナトリウム 0.025%  
精製水 32.085%

品番	品名	入数
057-58012	フルステリの除菌スプレー 500ml×12本入	500ml×12本
057-48002	フルステリの除菌スプレー 詰替用 4リットル×2本	4L×2本
057-48003	フルステリの除菌スプレー 18リットル詰め替用	18L×1個
057-53041	フルステリの除菌スプレーセット	500ml×3本 4L×1本

ご注文は 右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929 MAIL biosales@atect.co.jp  
TEL ☎ 0120-812-880

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は 右記にて承ります


FAX ☎ 0120-82-4929 MAIL biosales@atect.co.jp  
TEL ☎ 0120-812-880

アテクト 衛生検査 検索

◆品番の末尾「D」の商品は日本薬局方準拠品です

New 詰合せ

詰合せ：10枚単位でお客様のご要望に応じて  
各種生培地を詰め合わせての発送が可能です

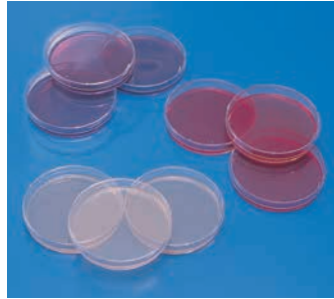

**特徴**  
培地性能試験を実施していますのでいつでも一定した高品質な培地を使用することができます  
10枚単位で詰め合わせての発送が可能です  
◆表以外の培地は受注生産にて承ります  
納期についてはお問い合わせ下さい  
サイズ 直径9cm×1.5cm

品番	品名	入数
053-13012D	生培地SCD寒天 100枚 局方	100枚
053-13008D	生培地SCDLP寒天培地 100枚 局方	100枚
053-13011D	生培地サブロー寒天培地 100枚 局方	100枚
053-13024D	生培地CP加サブロー寒天 100枚 局方	100枚
053-13056D	生培地R2A培地 100枚 局方	100枚
053-13009D	生培地GPLP寒天培地 100枚 局方	100枚
053-13129D	生培地マッコニー寒天培地 50枚 局方	50枚
053-13155D	生培地マンニト食塩寒天 50枚 局方	50枚
053-13160D	生培地セトリド寒天 50枚 局方	50枚
053-13159D	生培地コロンビア寒天 50枚 局方	50枚
053-13162D	生培地バイオレド胆汁酸7α糖 局方	50枚

生培地

品番	品名	入数
053-13101	生培地標準寒天培地 50枚	50枚 (10枚×5袋)
053-13102	生培地デゾキシコレート寒天 50枚	
053-13103	生培地CP加ポテトデキストロス寒天 50枚	
053-13104	生培地マデック寒天培地 50枚	
053-13105	生培地TCBS寒天培地 50枚	
053-13106	生培地卵黄加マンニト食塩寒天 50枚	
053-13107	生培地EZ2C寒天 50枚	
053-13110	生培地卵黄加NGKG寒天培地 50枚	
053-13127	生培地変法スキロー寒天培地 50枚	
053-13001	生培地標準寒天培地 100枚	
053-13002	生培地デゾキシコレート寒天 100枚	
053-13003	生培地CP加ポテトデキストロス寒天 100枚	
053-13004	生培地マデック寒天培地 100枚	
053-13005	生培地TCBS寒天培地 100枚	
053-13006	生培地卵黄加マンニト食塩寒天 100枚	
053-13081	生培地ベアードバーカー寒天 100枚	
053-13007	生培地EZ2C寒天 100枚	
053-13010	生培地卵黄加NGKG寒天培地 100枚	
053-13013	生培地BCP加プレートカウントアガール 100枚	
053-13020	生培地CP加GPLP寒天培地 100枚	30枚
053-13022	生培地M40Y寒天培地 100枚	
053-13535	生培地DG-18寒天培地 30枚	

※使用期限：製造日より3ヶ月以上 製品により異なる(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)


箱の大きさ 生培地100枚：47.5cm×23cm×19cm  
生培地 50枚：26cm×20cm×18cm

動画

試験管培地

ダーラム管入りですので、すぐにご使用いただけます


BGLB試験管培地 LB試験管培地 EC試験管培地

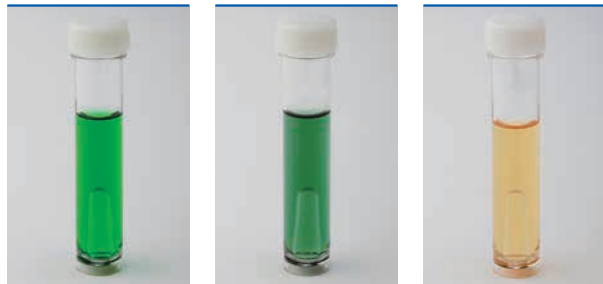

食品衛生法大腸菌群検査に準拠しています  
ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

大腸菌群および大腸菌(E.coli)の同時検出が可能な  
特定酵素基質培地による迅速同定培地です

EZ4U試験管培地

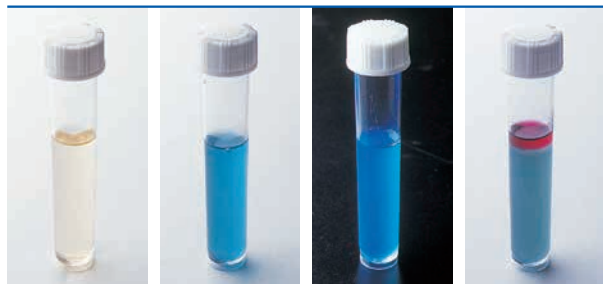

未接種 大腸菌群陽性 E.coli 陽性 インドール 試薬添加による確認試験(陽性)

品番	品名	入数
053-12003	BGLB試験管培地 240本	240本
053-12103	BGLB液体培地 120本入	120本
053-12503	BGLB液体培地 60本入	60本
053-12043	LB液体培地 240本入	240本
053-12143	LB液体培地 120本入	120本
053-12543	LB液体培地 60本入	60本
053-12042	EC液体培地 240本入	240本
053-12142	EC液体培地 120本入	120本
053-12542	EC液体培地 60本入	60本
053-12041	EZ4U液体培地 240本	240本
053-12141	EZ4U液体培地 120本入	120本
053-12541	EZ4U液体培地 60本入	60本
053-12244	ラバポート液体培地	80本
053-12844	ラバポート液体培地 40本入	40本

※使用期限：製造日より6ヶ月、ラバポート液体培地のみ製造日より5ヶ月(外箱に記載)  
各種少数販売いたします(60本入り・120本入り、ラバポート液体培地は40本入り)

箱の大きさ 試験管培地 60本：35cm×28cm×13cm  
試験管培地 80本：35cm×29cm×13cm  
試験管培地240本：37cm×29cm×22cm

◆品番の末尾「D」の商品と大容量SCD液体培地は日本薬局方準拠品です

培地充填試験用 大容量SCD液体培地



**特徴** 日本薬局方の培地充填試験に使用できずる過減菌済ですぐに使用できます  
フィルターの目詰りの心配はありません

**仕様** 滅菌：濾過滅菌  
容器：PET  
容量：3L  
◆Y線滅菌も承ります

品番	品名	入数
053-18001	大容量SCD液体培地 3L×3本入	3L×3本
053-18002	大容量SCD液体培地 2倍濃度植物由来	3L×3本

※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ 大容量SCD液体培地：16cm×37cm×31cm

液体培地



**特徴** 調製なしで、すぐにご使用いただけます

品番	品名	入数
053-18144D	SCD液体培地90ml 100本入 局方	90ml×100本
053-12044D	SCD液体培地10ml 240本入 局方	10ml×240本
053-19145D	サブロー液体培地100ml 50本入 局方	100ml× 50本
053-19146D	マッコニー液体培地 50本入 局方	100ml× 50本
053-12244D	ラバポート液体培地 80本入 局方	10ml× 80本

※使用期限：製造日より6ヶ月、ラバポート液体培地のみ製造日より5ヶ月(外箱に記載)

湯せん培地

**特徴** 湯せんしてシャーレに注ぐだけですぐに混濁培養が行えます

**仕様** 容器：500ml(写真右)スクリューキャップ付自立型袋  
容器：100ml(写真左)スクリューキャップ付ボトル



品番	品名	入数
055-12011	湯せん培地500ml 標準寒天培地 局方	500ml × 20本
055-12012	湯せん培地500ml デゾキシコレート寒天	
055-12013	湯せん培地500ml CP加ポテトデキストロス	100ml × 100本
055-11010	湯せん培地100ml 標準寒天培地	
055-11012	湯せん培地100ml デゾキシコレート寒天	
055-11013	湯せん培地100ml CP加ポテトデキストロス	

品番	品名	入数
055-12016D	湯せん培地500ml SCD寒天 20本入 局方	500ml × 20本
055-12015D	湯せん培地500ml サブロー 20本入 局方	
055-12024D	湯せん培地500ml CP加サブロー 20本 局方	
055-12013D	湯せん培地100ml CP加ポテト 局方	100ml × 100本
055-12017D	湯せん培地500ml R2A寒天 20本入 局方	
055-11016D	湯せん培地100ml SCD寒天 100本入 局方	100ml × 100本
055-11015D	湯せん培地100ml サブロー 100本入 局方	
055-11024D	湯せん培地100ml CP加サブロー 局方	100本
055-11013D	湯せん培地100ml CP加ポテト 局方	
055-11017D	湯せん培地100ml R2A 100本入 局方	

※湯せん培地20mlもごさいますので、お問い合わせ下さい  
※使用期限：製造日より3ヶ月以上 製品により異なる(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

箱の大きさ 湯せん培地100ml：50cm×26cm×21cm  
湯せん培地500ml：36cm×35cm×27cm

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

動画 詰合せ

スタンプ培地

詰合せ：10枚単位でお客さまのご要望に応じて各種スタンプ培地を詰め合わせての発送が可能です



**特徴** 培地面積25cm<sup>2</sup>です  
培地調製が不要で押し付けるだけで検査が容易です  
◆下記商品以外の培地は受注生産にて承ります  
Y線照射も対応致します  
サイズ 直径6.5cm×1.2cm

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

●入数 100枚(10枚×10袋) ◆30枚単位でも取り扱っております

品番	品名
053-11001	スタンプ培地標準寒天 100枚
053-11002	スタンプ培地デゾキシコレート寒天 100枚
053-11003	スタンプ培地CP加ポテトデキストロス 100枚
053-11004	スタンプ培地マデック寒天 100枚
053-11005	スタンプ培地TCBS寒天 100枚
053-11006	スタンプ培地卵黄加マンニツ食塩寒 100枚
053-11007	スタンプ培地EZ2C寒天 100枚
053-11008	スタンプ培地SCDLP寒天 100枚
053-11010	スタンプ培地卵黄加NGKG寒天培地 100枚

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
箱の大きさ スタンプ培地100枚：35cm×15cm×15cm

詰合せ

プチ生培地

詰合せ：10枚単位でお客さまのご要望に応じて各種生培地を詰め合わせての発送が可能です




**特徴** 直径6cmの小口径の生培地です  
陰性及び陽性を確認する検査においてプチ生培地のご使用により、コスト削減を実現します  
直径9cmの生培地よりも多くのシャーレがインキュベーターに入るため、1度により多くの検査を実施できます  
サイズ 直径6cm×1.5cm

品番	品名	入数
053-16001	プチ生培地標準寒天培地 100枚	100枚(5枚×20袋)
053-16004	プチ生培地マデック寒天培地 100枚	100枚(5枚×20袋)
053-16005	プチ生培地TCBS寒天培地 100枚	100枚(5枚×20袋)
053-16006	プチ生培地卵黄加マンニツ食塩寒 100枚	100枚(5枚×20袋)
053-16007	プチ生培地EZ2C寒天培地 100枚	100枚(5枚×20袋)
053-16010	プチ生培地卵黄加NGKG寒天 100枚	100枚(5枚×20袋)

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
箱の大きさ プチ生培地100枚：33cm×15cm×17cm

動画

コリターグ®

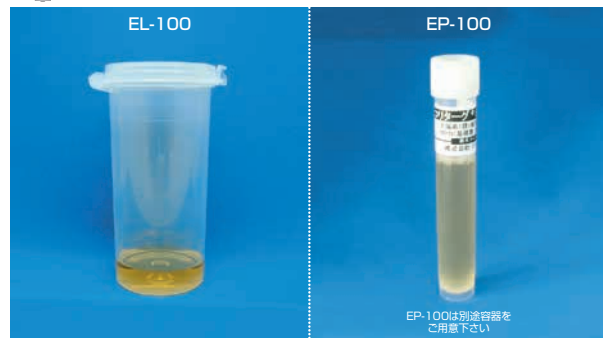

**特徴** 上水試験方法2011年に記載されているIPTG添加ONPG-MUG培地です  
IPTG添加ONPG-MUG培地で唯一の液体培地です

**使用方法** 検水を100ml入れて、36℃±1℃、24時間培養する  
液体が黄色く変化すれば大腸菌群陽性と判断します  
紫外線ランプを照射し、培地が青色の蛍光を発すれば大腸菌陽性と判断します  
(比色判定用のコンパレータも別途販売しております)

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数
057-10601	コリターグEP-100 100本	100本
057-10602	コリターグEP-100 10本	10本
057-10101	コリターグEL-10 200本	200本
057-10102	コリターグEL-10 100本	100本
057-10201	コリターグEL-100 100本	100本
057-10202	コリターグEL-100 25本	25本
057-10301	コリターグEL-1000 2本	2本
057-10302	コリターグEL-1000 1本	1本

※使用期限：製造日より12ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

箱の大きさ	品名	入数
EP-100 100本	59cm×34cm×23cm	
EP-100 10本	6.5cm×15cm×10.5cm	
EL-10 200本	35cm×31.5cm×24cm	
EL-10 100本	35cm×30.5cm×12cm	
EL-100 100本	59cm×34cm×23cm	
EL-100 25本	35cm×30.5cm×12cm	
EL-1000 2本	12.5cm×25cm×27cm	
EL-1000 1本	11.5cm×11.5cm×25cm	

動画

CRスタンプ



**特徴** 鼻前庭や手指、製造ラインなどのふき取り検査にお使いいただけます  
製品同士が積み重ねられるため、コンパクトにまとめ製造現場へ持ち運び易いです

**使用方法** ①スポンジ部分で検査箇所をふき取る  
②培地の表面全体に、直接スタンプして、均一に塗布する  
③培養後、菌数を測定する

**仕様** 入数：1,000個(10個×100袋) 滅菌：EOG滅菌  
材質：本体・フタ：ポリプロピレン  
スポンジ：ポリエチレン

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数
012-30001	CRスタンプ 1000個入(10個×100袋)	1,000個(10個包装×100袋)
012-30002	CRスタンプ 300個入(10個×30袋)	300個(10個包装×30袋)

箱の大きさ CRスタンプ1000個入：40cm×39cm×29cm

ハンドスタンプシャーレ  
培地入りハンドスタンプシャーレ



**特徴** 手のひら全体が入る大きさのシャーレです **仕様** 滅菌：電子線滅菌(培地無しハンドスタンプシャーレのみ)  
材質：ポリスチレン  
サイズ：21.5cm×14.5cm×1.2(H)cm

品番	品名	入数
011-90101	ハンドスタンプシャーレ 120枚	120枚(10枚包装)
011-90102	ハンドスタンプシャーレ 60枚入	60枚(10枚包装)
011-90201	培地入りハンドスタンプ(標準寒天) 60枚	60枚(1枚包装)
011-90202	培地入りハンドスタンプ(デゾキシコレート) 60枚	
011-90203	培地入りハンドスタンプ(卵黄加マンニツ) 60枚	
011-90205	培地入りハンドスタンプCP加ポテト 60枚	

※使用期限：培地入りハンドスタンプシャーレは製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

●2は、培地入りハンドスタンプシャーレです  
箱の大きさ ハンドスタンプシャーレ：38cm×29cm×23cm

動画

y-pit(ふき取り検査用器具)



**特徴** 様々な環境検査で、細菌を簡単に採取できます  
綿棒と一体型のキャップを採用しているため、作業性に優れています  
希釈液が10ml分注されています

**使用方法** ①キャップを本体からはずして綿棒で測定箇所の表面を100cm<sup>2</sup>を目安にふき取る  
②キャップを戻してよく振り、綿棒に付着した微生物を分散させる  
③溶液をスポイトなどで採取後、培地に滴下し培養する

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数
051-51001	ワイピット 240本入	240本(40本×6箱)
051-51101	ワイピット 120本入	120本(10本×12箱)
051-51201	ワイピット 60本入	60本(10本×6箱)

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載) 箱の大きさ y-pit 240本：37cm×29cm×23cm  
y-pit 120本：40cm×30cm×12cm  
y-pit 60本：28cm×35cm×28cm

滅菌綿棒



**特徴** 優れた吸水性で  
綿棒先端部分が膨張しません  
残留溶解物質が少ない仕様でふき取り検査に最適です  
また、可燃ごみとして焼却でき廃棄も簡単です

品番	品名	入数
017-20001	滅菌綿棒 10本包装	1000本(10本包装×100袋)
017-20002	滅菌綿棒 20本包装	1000本(20本包装×50袋)

箱の大きさ 滅菌綿棒：20cm×29cm×21cm

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

滅菌希釈水・緩衝液



ふたが白:滅菌希釈水  
ふたが黄:滅菌ペプトン食塩緩衝液  
ふたが緑:滅菌リン酸緩衝液

**特徴** (9mlタイプ) 段階希釈水としてご使用いただけます  
スクリュー式キャップを採用しています  
自立タイプの容器なので、作業性が向上します  
(45ml・90mlタイプ) 検体を入れたストマッカー袋に滅菌希釈水全量を注ぐだけで、  
固形試料の前処理ができます

**仕様** 9ml (本体) ポリスチレン (キャップ) ポリエチレン  
90ml・45ml (本体) ポリプロピレン (キャップ) ポリエチレン  
希釈水 (pH7.2)  
滅菌ペプトン食塩緩衝液 (pH7.0)  
滅菌リン酸緩衝液 (pH7.2)  
◆ご希望のpH値について、ご相談下さい

①滅菌希釈水

品番	品名	入数
051-21001	滅菌希釈水 9ml	360本
051-31101	滅菌希釈水 45ml	100本
051-31001	滅菌希釈水 90ml	100本
051-31201	滅菌希釈水 225ml 40本	40本入
051-32001	滅菌希釈水 3L×3本入	3L×3本入り

※使用期限: 製造日より6ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ 滅菌希釈水 9ml: 44cm×29cm×34cm

②緩衝液

品番	品名	入数
051-71001	滅菌ペプトン食塩緩衝液 90ml	100本
051-42001	滅菌ペプトン食塩緩衝液 9ml 360本入	360本(40本×9箱)
051-61001	滅菌リン酸緩衝液 90ml	100本
051-41001	滅菌リン酸緩衝液 9ml	360本(40本×9箱)
051-61601	滅菌リン酸緩衝液 990ml 10本入	10本

※使用期限: 製造日より6ヶ月(外箱に記載) ◆225mlタイプも販売しております  
箱の大きさ 緩衝液 9ml: 44cm×29cm×34cm  
緩衝液 90ml: 35cm×27cm×26cm

ソルティバッグ



**特徴** 希釈水が分注された、ストマッカー用袋です  
225ml、90mlの2タイプを取り揃えましたので用途に応じてお使いいただけます  
検体を入れるだけで、そのまま、ストマッカー処理が行えます  
自立型の袋なので、スタンドが不要です  
袋上部にノッチを入れていますので、容易に開封できます  
◆フィルター付きも販売しております

品番	品名	入数
051-81101	ソルティバッグ 225ml	30袋
051-81001	ソルティバッグ 90ml	30袋

※使用期限: 製造日より6ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ ソルティバッグ: 39cm×50cm×28cm

ディスポピペティ




**特徴** 正確に液体の計量や分注が行えます  
使い捨てのため洗浄・滅菌などの手間が省けランニングコストの低減にも貢献します

**仕様** 滅菌: ガンマ線滅菌 材質: ポリスチレン  
製品の仕様は随時変更になる場合がございます  
ご了承下さい

品番	品名	入数
021-50001	ディスポピペティ 1ml 個包装300本入	300本入
021-50002	ディスポピペティ 2ml 個包装300本入	300本入
021-50003	ディスポピペティ 5ml 個包装200本入	200本入
021-50004	ディスポピペティ 10ml 個包装200本入	200本入
021-50006	ディスポピペティ 50ml 個包装100本入	100本入

箱の大きさ ディスポピペティ1ml個包装・2ml個包装 : 19cm×34cm×18cm  
ディスポピペティ5ml個包装・10ml個包装 : 19cm×40cm×18cm  
ディスポピペティ50ml個包装 : 19cm×40cm×24cm

ディスポスポイト

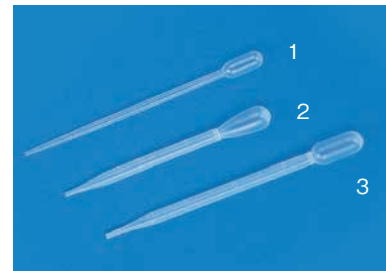

**特徴** 目安の目盛り付き  
無滅菌製品もあります  
※滅菌1本包装品もあります

**仕様** 入数: 1,000本(10本×100袋)  
500本(1本×500袋)  
滅菌: EOG滅菌  
材質: ポリエチレン

●1000本


品番	品名	サイズ
1 021-20102	ディスポスポイト1ml滅菌済1000本入り	長さ:15.4cm
2 021-20202	ディスポスポイト2ml滅菌済1000本入り	長さ:13.5cm
3 021-20302	ディスポスポイト3ml滅菌済1000本入り	長さ:17.5cm
1 021-20101	ディスポスポイト1ml無滅菌1000本入り	長さ:15.4cm
2 021-20201	ディスポスポイト2ml無滅菌1000本入り	長さ:13.5cm
3 021-20301	ディスポスポイト3ml無滅菌1000本入り	長さ:17.5cm

箱の大きさ ディスポスポイト 1ml: 29cm×45cm×18cm  
ディスポスポイト 2ml: 29cm×45cm×18cm  
ディスポスポイト 3ml: 29cm×44cm×29cm

●個包装 500本入り

品番	品名	サイズ
1 021-20112	ディスポスポイト1ml個包装500本入り	長さ:15.4cm
2 021-20212	ディスポスポイト2ml個包装500本入り	長さ:13.5cm
3 021-20312	ディスポスポイト3ml個包装500本入り	長さ:17.5cm

ストマッカー用袋

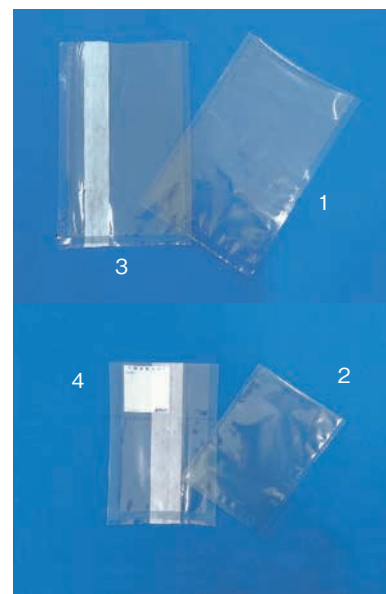

特徴

フィルター付ストマッカー用袋はフィルターにより、ストマッカー処理後の残渣を取り除いた試料液を簡単に採取できます

仕様


滅菌: ガンマ線滅菌  
材質: ナイロン+ポリエチレン  
サイズ: 1. 30(深さ)cm×19(幅)cm  
2. 15(深さ)cm×11(幅)cm  
3. 30(深さ)cm×19(幅)cm  
4. 18(深さ)cm×12(幅)cm

◆20枚からの少数販売も行なっています  
※ご希望枚数をご相談ください

品番	品名	入数
1 061-11200	ストマッカー用袋(大)190×300mm 1000枚入	1,000枚(20枚包装)
2 061-11300	ストマッカー用袋[小]110×150mm 1000枚入	
3 061-21001	フィルター付ストマッカー用袋500枚入り	500枚(20枚包装)
4 061-21013	フィルター付ストマッカー用袋(小)500枚入り	500枚(5枚包装)

箱の大きさ ストマッカー用袋(大) : 22cm×36cm×22cm  
ストマッカー用袋(小) : 17cm×22.5cm×19cm  
フィルター付ストマッカー用袋(大) : 22cm×36cm×22cm  
フィルター付ストマッカー用袋(小) : 17cm×22.5cm×19cm

ディスポコンラージ棒/マイクロループ

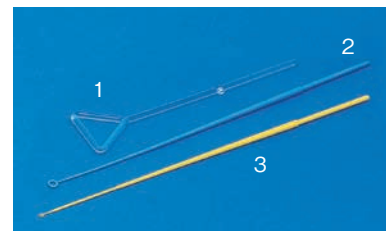

特徴

滅菌ディスポ製品のため、使用前の煩雑な洗浄滅菌作業から解放されます  
コンタミネーションの心配がなく、安心してご使用いただけます


仕様

ディスポコンラージ棒 直径0.4cm×15cm  
ディスポマイクロループ 長さ23cm  
滅菌: EOG滅菌 材質: ポリスチレン

品番	品名	入数
1 017-01101	ディスポコンラージ棒1000本入(10本包装)	1,000本(10本包装)
017-01201	ディスポコンラージ棒個包装(1本×500袋)	500本(1本包装)
2 017-02101	ディスポマイクロループ10μl 2000本(20本)	2,000本(20本包装)
017-02201	ディスポマイクロループ10μl 個包装(5本)	1,000本(5本包装)
3 017-03101	ディスポマイクロループ1μl 2000本(20本)	2,000本(20本包装)
017-03201	ディスポマイクロループ1μl 個包装(5本)	1,000本(5本包装)

箱の大きさ ディスポコンラージ棒 : 20cm×38cm×28cm  
ディスポマイクロループ10μl : 26cm×34cm×14cm  
ディスポマイクロループ1μl : 26cm×34cm×14cm

フィルター付ストマタッチ袋

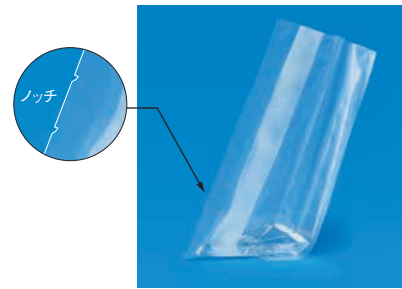

**特徴** 自立するので袋を片手で扱えます  
ノッチがあるので、ピペットの扱いがしやすくなり、ピペット本体を汚すこともありません

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ナイロン+ポリエチレン  
サイズ：30(深さ)cm×14(幅)cm(マチ幅 5cm)

品番	品名	入数
061-22001	400枚入フィルター付ストマタッチ袋	400枚(20枚包装)

箱の大きさ フィルター付ストマタッチ袋：32cm×37cm×14cm

ディスポピンセット



**特徴** 1本ずつの包装で安心です  
先端部分に滑り止め加工があります

**仕様** 滅菌：EOG滅菌  
材質：ポリプロピレン

品番	品名	サイズ	入数
061-33001	滅菌済みディスポピンセット	7cm	100本

箱の大きさ ディスポピンセット：19cm×26cm×16.5cm

オートクレープ用廃棄バッグ



**特徴** 口締め用バンド付き

**仕様** 入数：200枚  
材質：特殊耐熱ポリプロピレン  
サイズ：大 70(深さ)cm×50(幅)cm  
中 66(深さ)cm×30.5(幅)cm  
小 40(深さ)cm×30(幅)cm

◆少数販売も行なっています

品番	品名	入数
062-11100	オートクレープ用廃棄バッグ(700×500mm)	200枚
062-11101	オートクレープ用廃棄バッグ大(700×500)クリア	
062-11102	オートクレープ用廃棄バッグ中(305×660)青	
062-11103	オートクレープ用廃棄バッグ中(305×660)クリア	
062-11104	オートクレープ用廃棄バッグ小(300×400)青	
062-11105	オートクレープ用廃棄バッグ小(300×400)クリア	

箱の大きさ オートクレープ用廃棄バッグ：39cm×53cm×10cm  
オートクレープ用廃棄バッグ中305×660サイズ：34cm×38cm×12cm

滅菌検査袋(保存食用袋)



**特徴** 検体保存や保存食用にご使用いただけます  
チャック式のため、ワンタッチで開閉できます

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエチレン  
サイズ：D 12(深さ)cm×8.5(幅)cm F 17(深さ)cm×12(幅)cm  
H 24(深さ)cm×17(幅)cm J 34(深さ)cm×24(幅)cm

※サンプリングバッグとしてもご使用いただけます

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

※ご希望枚数はご相談ください

品番	品名	入数
1 061-21201	滅菌検査袋D(2000枚入)	2,000枚(100枚包装)
061-21204	滅菌検査袋F(1000枚入)	1,000枚(100枚包装)
2 061-21202	滅菌検査袋H(1000枚入)	1,000枚(100枚包装)
3 061-21203	滅菌検査袋J(700枚入)	700枚(100枚包装)
061-21205	滅菌検査袋MARK-H(1000枚入)	1,000枚(100枚包装)

箱の大きさ 滅菌検査袋D：20cm×30cm×13cm  
滅菌検査袋F：19cm×23cm×17cm  
滅菌検査袋H：23cm×38cm×15cm  
滅菌検査袋J：29.5cm×45cm×18cm

動画

ディスポロックボトル



ロック解除状態

ロック状態

閉じて  
ロックする

**特徴** 口径が広くサンプル採取や、分注作業がし易いです  
密封できます ロックできます  
透明なので中身が確認できます

**仕様** 滅菌：電子線滅菌  
材質：ポリプロピレン  
容量：120ml(最大)

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください  
※ご希望枚数はご相談ください

品番	品名	入数
015-00001	滅菌済みディスポロックボトル 150本入	150本入 (5本包装×30袋)

箱の大きさ ディスポロックボトル：26cm×53cm×40.5cm

滅菌検査液袋



**特徴** チャック式のため、液漏れを防止できます  
スタンディング(自立式)タイプです

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ナイロン+ポリエチレン  
サイズ：10(幅)cm×16(深さ)cm

品番	品名	入数
061-21301	滅菌検査液袋200ml(300枚入)	300枚(50枚包装)

箱の大きさ 滅菌検査液袋：27.5cm×35cm×9cm

New

滅菌検査液袋 遮光タイプ1200ml



**特徴** ■5層フィルムでバリアー性あり湿度対策可能  
■アルミ素材で遮光性機能あり  
■ヒートシール対応袋で密封が可能  
■自立式袋で操作性に優れている  
■丸めて廃棄でき、ゴミを削減  
■10枚/袋など必要な枚数で梱包可能

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエステル・ポリエチレン・アルミ  
サイズ：18(幅)cm×26(深)cm

品番	品名	入数
061-21302	滅菌検査液袋 遮光タイプ 1200ml	50枚/袋



コロニー標本



**特徴** 本物の細菌と判別がつかないくらい、精度にこだわっています  
実際の細菌では無いので、感染の恐れがなく安全です  
判定基準としてご使用下さい


**仕様** 材質：プラスチック

※特注でご希望のコロニー標本を作成致します。  
詳しくはお問い合わせください。

品番	品名
095-00001	コロニー標本シリーズ 黄色ブドウ球菌
095-00002	コロニー標本シリーズ セレウス菌
095-00003	コロニー標本シリーズ サルモネラ
095-00004	コロニー標本シリーズ 腸炎ビブリオ

セレウス菌

滅菌済ディスポまな板 (ブルー・グリーン・オレンジ)

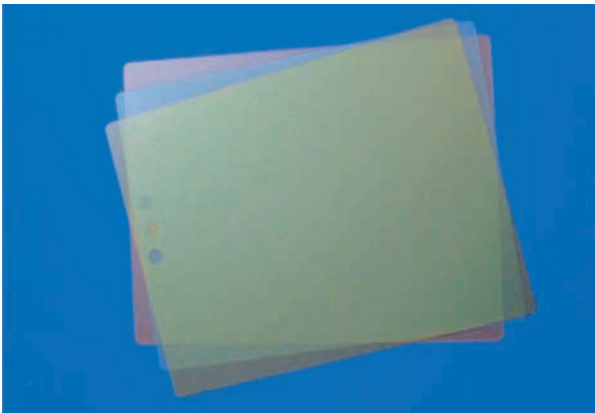

**特徴** 3色あるため、食材、場所等によって使い分けことができ衛生管理や整理整頓に便利です  
ガンマ線滅菌済みで、まな板からの雑菌汚染の心配が無く衛生的です

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリプロピレン

品番	品名	入数
061-40001	滅菌済ディスポまな板	30枚入り(10枚×3色)



滅菌採水ボトル



**特徴** 密閉容器なので、持ち運びにも安心です  
広口のスクリューキャップ式容器なので、容易に採取できます  
ハイボ入りは、水道水の細菌検査にご使用いただけます

**仕様**

- (100ml) サイズ 胴径 直径5cm×高さ9.4cm 口径 3.2cm  
材質：(本体)ポリエチレン (キャップ)ポリプロピレン
- (200ml) サイズ 胴径 直径5.9cm×高さ11.5cm 口径 3.2cm  
材質：(本体・キャップ)ポリエチレン
- (クリアボトル) サイズ 胴径 直径5cm×高さ9.4cm 口径 3.2cm  
材質：(本体・キャップ)ポリプロピレン

◆品番末尾「EB」：電子線滅菌  
それ以外：EOG滅菌

品番	品名	入数
014-20121EB	電子滅菌採水ボトル(ハイボなし)100ml	200個
1 014-20121	滅菌採水ボトル(ハイボなし)100ml	200個
014-20221	ハイボ入滅菌採水ボトル 100ml	200個
2 014-21121EB	電子滅菌採水ボトル(ハイボなし)200ml	150個
014-21121	滅菌採水ボトル(ハイボなし)200ml	150個
014-21221	ハイボ入滅菌採水ボトル 200ml	150個
3 014-20321	滅菌クリアボトル 100ml	200個
4 014-20122	滅菌採水ボトル(ハイボなし)50ml	500個

箱の大きさ (100ml)：47cm×47cm×34cm  
(200ml)：40cm×51cm×43cm

～食品衛生法準拠品～



●用途：  
サルモネラ属菌の前増菌培養  
黄色ブドウ球菌検査の検体の  
希釈や、段階希釈等

●対象：  
非加熱食肉製品、特定加熱食肉  
製品、加熱食肉製品(加熱殺菌  
後包装)


●特徴：  
225ml：自立型の袋ですので、試料を入れてそのまま培養でき  
ます

◆9mlも製造可能です

品名	緩衝ペプトン水 225ml 30袋入
品番	053-15002
入数	30袋

品名	緩衝ペプトン水 90ml
品番	051-16101
入数	100本

サルモネラ属菌試験法

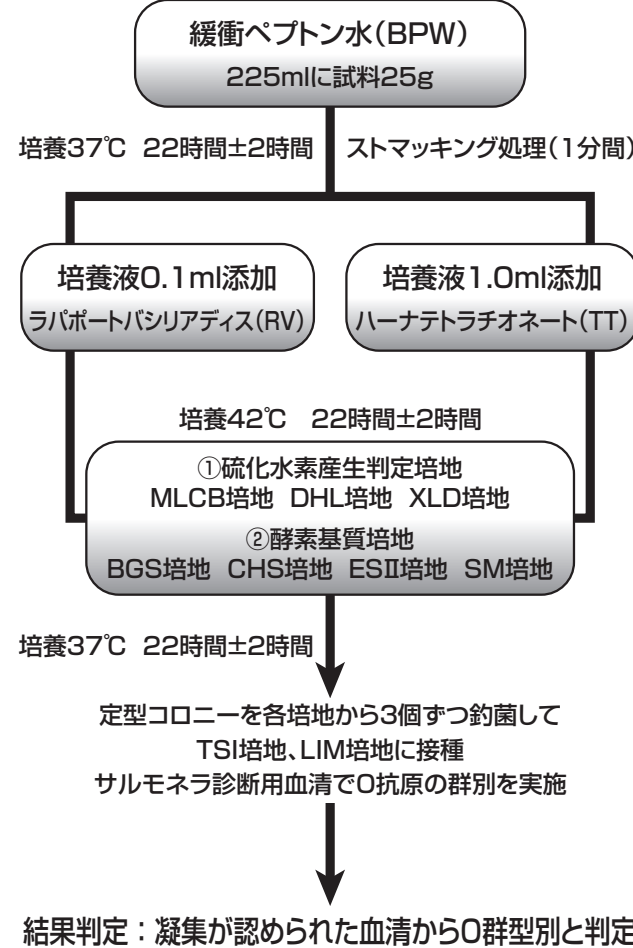

黄色ブドウ球菌試験法

